

Lakanoita kaikkiin tilanteisiin

System**RoMedic**[™]




- Liukulakanat
- Siirtolakanat
- Liukupinnalliset siirtolakanat
- Inkontinenssilakanat
- Patjansuojukset ym.


DHG
Moving Health Forward

Lakanaopas


Valitse lakanalle oikea liukualue käyttäjän toimintakyvyn mukaan.

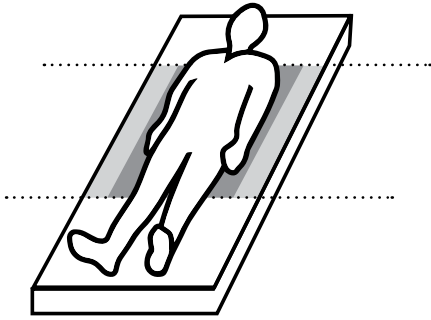

Liukualue lonkka: aktiivisemmalle/kevyemmälle käyttäjälle, joka tarvitsee liukutoimintoa vain lantion alueella.

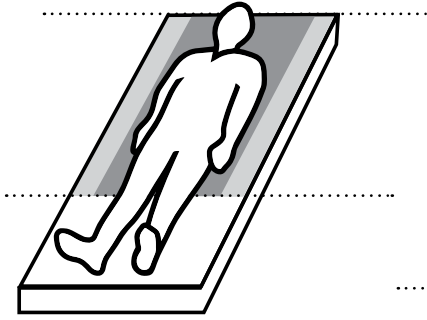


Liukualue pää-lonkka: vähemmän aktiiviselle / painavammalle käyttäjälle, joka tarvitsee liukutoimintoa lonkan alueella ja siitä ylöspäin.

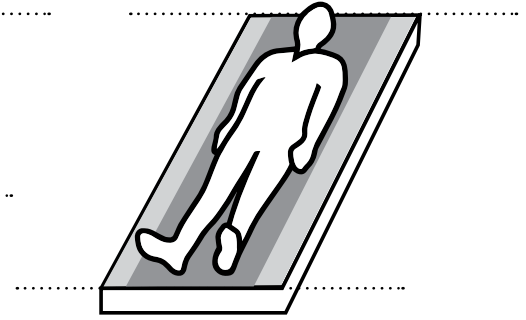

Liukualue pää-jalat: passiiviselle / hoitoisuusluokituksestaan raskaammalle käyttäjälle, jolle liukutoimintoa tarvitaan koko kehon alueella.

Valitse oikea liukulakana sängyn leveyden mukaan.

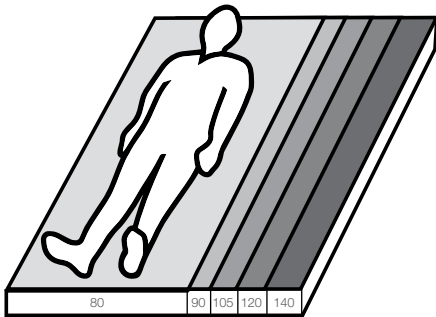

Sängyn leveys

Patjan mitta on tärkeä tietää, jotta voidaan optimoida lakanan liukupinta ja stimuloida käyttäjän aktiivisuutta. Liukulakanan liukualue ei myöskään saa olla liian leveä suhteessa patjan leveyteen, jotta käyttäjä ei liu'u alaspäin patjalla. Siirtolakanoille tai liukupinnallisille siirtolakanoille ei ole patjan leveyttä koskevia suosituksia.

Etsi oikea ominaisuus.



Inkontinenssisuoja

Pestävä inkontinenssisuoja asetetaan tavallisen lakanan ja muiden vuodevaatteiden päälle. Inkontinenssisuojia saa joko alapuolen liukupinnalla tai ilman sitä. Materiaali on erittäin imukykyinen ja jakaa nesteen suuremmalle alueelle.



Kahvat

Joissakin liukupinnallisissa siirtolakanoissa on myös kahvat, joita voidaan käyttää käyttäjää nostettaessa. Tämä helpottaa lakanan sijoittamista paikoilleen ja auttaa alaspäin pesussa sekä valjaiden käytössä.



Joustoreuna


Joustoreunaisissa liukulakanoissa, jotka vedetään patjan reunojen yli, on tämä symboli. Muissa lakanoissa on liepeet, jotka taitetaan patjan alle.

Pesuohjeet.


Valitse oikea tuote suhteessa pesuohjeeseen.




Valitse oikeat yhdistelmät.

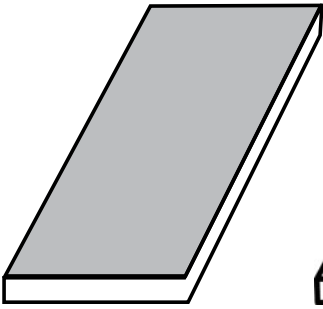


Patjansuojus nesteenpitävällä kerroksella. Asetetaan patjan päälle.

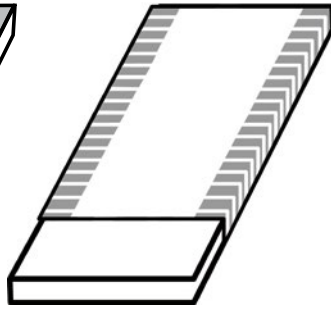

Liukulakana. Keskiossa satiinia ja karkeampaa materiaalia sivuliepeissä. Liukuu kuvion suuntaan.

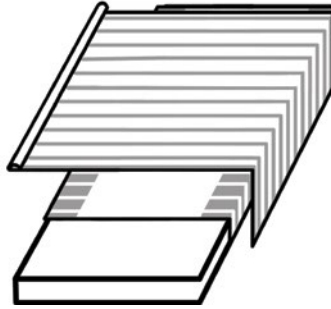

Liukulakana + siirtolakana. Helpottaa kääntymistä ja vähentää liukulakanan satiinista huokuvaa lämpöä. Liukuu kuvion suuntaan.

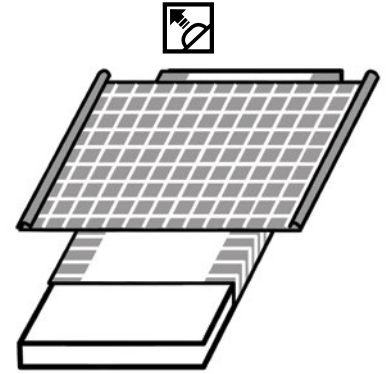

Liukulakana + liukupinnallinen siirtolakana. Molemmissa lakanoissa on liukuva pinta alapuolella ja vastaavasti yläpuolella. Liukuu kuvion suuntaan.

Näin yhdistelmiä käytetään.



Jos käyttäjä pystyy kääntymään itse, hänelle riittää yleensä liukulakana, joka lisää liukuvuutta niillä alueilla, joilla sitä tarvitaan.






Liukulakanan ja siirtolakanan yhdistelmää käytetään, kun käyttäjä on vähemmän aktiivinen ja/tai painavampi / hoitoisuusluokitukseltaan raskas.






Liukulakanan ja liukupinnallisen siirtolakanan yhdistelmää käytetään, kun käyttäjä on passiivinen ja/tai painava / hoitoisuusluokitukseltaan raskas. Tätä yhdistelmää käytetään usein nostojen, hygieniatoimien ja valjaiden käytön yhteydessä.

Etsi oikea lakana

Esimerkki tuoteluettelosta:

Tuotenumro	Tuotteen nimi	Sopii patjaan (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukualue (cm)	Väri	Toiminto	Muuta
1661	WendyLett	120	120	120	95	harmaa-valkoraidallinen	liukulakana	  

Tuotenumro uudelleen: 1661
 Tuotteen nimi: WendyLett
 Mitat (pituus + leveys): 120 x 120 cm
 Vyöhyke / liukupinta: 95 cm
 Tuotteen väri: harmaa-valkoraidallinen
 Tuotteen toiminto: liukulakana
 Lisätietoja: liukulakana
 Eriyisominaisuudet:   
 Lakana + liukualue patjalla


WendyLett-valikoima




WendyLett
Liukulakanat
sivu 5




WendyLett 2Way
Siirtolakanat
sivu 6

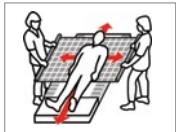

WendyLett 4Way
Liukupinnalliset
siirtolakanat
sivu 7

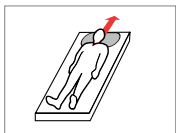

WendyLean
Tyynyliina
sivu 8

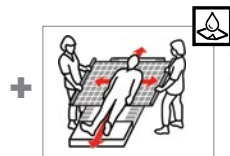

WendyLett Inco -sarja
WendyLett 4Way,
Inco Liukupinnalliset
siirtolakanat
sivu 7



EasyRoll-valikoima



EasyRoll
Liukulakanat
sivut 9–11




EasyRoll 2Way
Siirtolakanat
sivu 12



EasyRoll 4Way
Liukupinnalliset
siirtolakanat
sivu 13



EasyRoll-tyynyliina
sivu 15

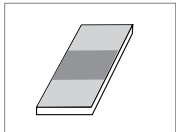

EasyRoll-suojalakana
ja patjansuojus
sivut 16–18



EasyRoll
Liukulakanat, Inco
sivu 11



EasyRoll Inco 2Way
Liukulakanat
sivu 12



EasyRoll 4Way
Liukupinnallinen
siirtolakana, Inco
sivu 13


WendyLett-tuotteet ovat patentoituja, korkealaatuisia tuotteitamme, jotka on suunniteltu helpottamaan siirtymistä sängyssä ylöspäin sekä kääntymistä ja pieniä asentomuutoksia sängyssä.

Direct Healthcare Group -konsernin WendyLett-lakanat muodostavat yhdessä tarkoin harkitun järjestelmän, johon kuuluu toisiaan täydentäviä liuku- ja siirtolakanoita. Ne helpottavat sekä käyttäjän, hoitohenkilöstön että omaishoitajan arkea.

WendyLett-liukulakana

WendyLett on satiiniliukulakana. Liukuva liike tapahtuu sivusuuntaisesti raitojen suuntaan. WendyLett sopii käyttäjille, joiden on vaikea kääntyä sängyssä. WendyLett-lakanassa on sileä keskiosa, mikä tarkoittaa, että kääntymiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Käyttäjä voi helposti liukua sivusuunnassa, mutta reunojen liukumaton materiaali pysäyttää liikkeen, jotta hän ei putoa sängystä. Materiaali estää myös käyttäjää liukumasta

alaspäin sängyssä. Kun WendyLett-lakana ei ole käytössä, se voidaan taitella patjan ympärille tavallisen lakanan tavoin niin, että sileä osa on sängyn keskellä. Jos käyttäjä tarvitsee enemmän apua, WendyLett voidaan yhdistää WendyLett 2Way -siirtolakanaan tai liukupinnalliseen WendyLett 4Way -siirtolakanaan. WendyLett-tuotteissa on eri malleja ja kokoja.

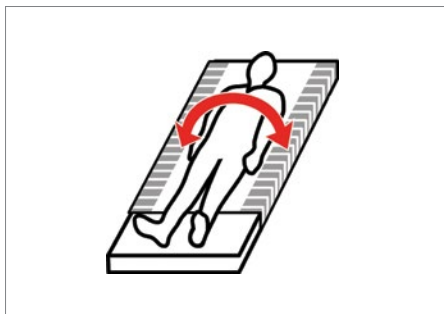

Yleiskatsaus WendyLett-liukulakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii paikalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Lakana	Lakanan pituus	Liukualue
1609	WendyLett	80-90	100	200	60	valkoinen	liukulakana		tuotenumero 1609		
1614	WendyLett	80-90	140	200	60	valkoinen	liukulakana		tuotenumero 1614		
1629	WendyLett	80-90	100	200	60	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1629		
1634	WendyLett	80-90	140	200	60	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1634		
1641	WendyLett	90	200	90	70	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1641		
1639	WendyLett	105	200	200	70	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1639		
1651	WendyLett	105	200	105	80	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1651		
1667	WendyLett	120	100	220	100	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1667		
1668	WendyLett	120	140	220	100	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1668		
1669	WendyLett	120	200	220	100	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1669		
1661	WendyLett	120	200	120	95	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1661		
1671	WendyLett	140	200	140	110	harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana		tuotenumero 1671		
1681	WendyLett	- 200	365	70		harmaa-valkoraiddallinen	liukulakana	erityisen leveä, jotta liukupinnan voi sijoittaa halutulla tavalla	tuotenumero 1681		

Materiaali: polyesteri, puuvilla, satiini.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluinetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.




CE Luokan 1 lääkin-
nällinen laite



WendyLett 2Way -siirtolakanana

WendyLett 2Way on WendyLett-liukulakanalle soveltuvasta materiaalista valmistettu siirtolakanana. Liukuva liike on sivuttainen eli raitojen suuntainen, mikä tarkoittaa, että käyttäjä ei liu'u kohti sängyn jalkopäätä.

WendyLett 2Way asetetaan WendyLett-liukulakanan päälle. Yhdistelmän avulla avustajan on helppo kääntää käyttäjää sivusuunnassa. WendyLett 2Way -tuotteessa on useita eri malleja ja kokoja.

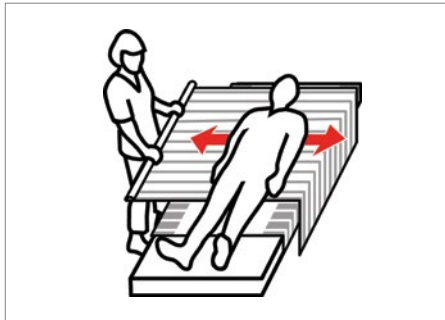

Yleiskatsaus WendyLett 2Way -siirtolakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii potilaille (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukusuunta
1620	WendyLett 2Way	-	90	180	-	valkoinen	siirtolakanana		tuotenumero 1620
1631	WendyLett 2Way	-	100	200	-	harmaa-valkoraikallinen	siirtolakanana		tuotenumero 1631
1636	WendyLett 2Way	-	140	200	-	harmaa-valkoraikallinen	siirtolakanana		tuotenumero 1636

Materiaali: polyesteri, puuvilla, satiini.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluinetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.



CE Luokan 1 lääkinnällinen laite



Meidän WendyLett-tuotteemme




- Ohut, laadukas kangas, joka hengittää.
- Sopii käyttäjille, joilla on riski saada painehaavoja.
- Selkeät kuviot näyttävät liukusuunnan.



Liukupinnallinen WendyLett 4Way -siirtolakana

WendyLett 4Way on liukupinnallinen siirtolakana, joka voidaan yhdistää WendyLett-liukulakanaan helpottamaan sekä sivuttaista että pitkittäistä liikettä sängyssä, kuten ruutukuvio osoittaa. WendyLett 4Way asetetaan WendyLett-liukulakanan päälle.

Yhdistelmä mahdollistaa asennon vaihtamisen neljään suuntaan ja helpottaa siten sängyssä kääntymistä, siirtymistä kohti sängyn yläpäätä ja pienempiä asennon muutoksia sängyssä jopa kookkaille, painaville tai täysin passiivisille käyttäjille. WendyLett 4Way -tuotteessa on monia eri malleja ja kokoja.

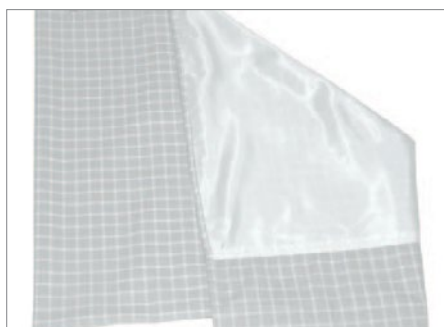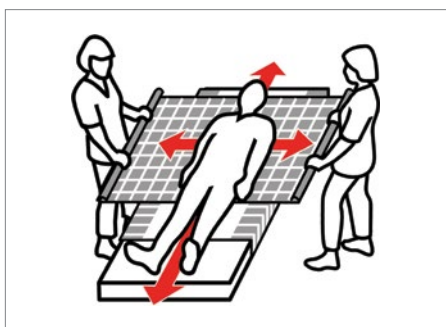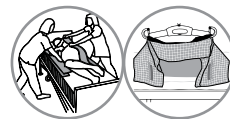

Yleiskatsaus liukupinnallisiin WendyLett 4Way -siirtolakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukuosuunta
1657	WendyLett 4Way	-	140	190	-	Harmaa-valkokuuinen	Liukupinnallinen siirtolakana	2 x 7 kahvaa	tuotenumero 1657
1637	WendyLett 4Way	-	140	200	-	harmaa-valkokuuinen	liukupinnallinen siirtolakana		tuotenumero 1637
1647	WendyLett 4Way	-	200	200	-	harmaa-valkokuuinen	liukupinnallinen siirtolakana		tuotenumero 1647
1652	WendyLett 4Way	-	140	260	-	harmaa-valkokuuinen	liukupinnallinen siirtolakana	leveämpi patja	tuotenumero 1652

Materiaali: polyesteri, puuvilla, satiini.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluinetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.



CE Luokan 1 lääkinnällinen laite



Yleiskatsaus liukupinnallisiin WendyLett 4Way Inco -siirtolakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukuosuunta
1648	WendyLett 4Way, Inco	-	75	200	-	harmaa-valkokuuinen	liukupinnallinen siirtolakana	lisäkangasta molemmin puolin	tuotenumero 1648
1649	WendyLett 4Way, Inco	-	140	120	-	harmaa	liukupinnallinen siirtolakana	2 x 7 kahvaa	tuotenumero 1649

Materiaali: polyesteri, puuvilla, satiini.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluinetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.



CE Luokan 1 lääkinnällinen laite



WendyLean

Patentoidut, sisään vetäytyvät kahvat eivät ole tämän tyynyliinan ainoa hieno ominaisuus, mutta ne ovat erittäin kätevät, kun autat käyttäjää siirtymään ylempäsängyssä tai nousemaan sängyn laidalle istumaan.

Tyynyliinan alapuoli on valmistettu sileästä satiinista, joten tyynyä on helppo oikaista ja se on helppo vetää hartioiden alle, kun käyttäjää halutaan nostaa. Raidat osoittavat, mihin suuntaan liukuminen on helpompaa.



- Sileä satiini ja sisään vetäytyvät kahvat

Yleiskatsaus WendyLean-tuotteisiin

Tuotenumro	Tuotteen nimi	Sopii potilaille (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukusuunta ↑
1680	WendyLean	-	50	60	-	harmaa-valkoraidallinen	tyynyliina	2 kahvaa	tuotenumro 1680 ↓

Materiaali: Päällipuoli: polyesteri/puuvilla. Sisäpuoli: puuvilla/polyesteri. Alapuoli: satiini.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluainetta. Valuta kuivaksi tai rumpukuivavaa matalalla lämmöllä, jotta tuote kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.



CE Luokan 1 lääkinnällinen laite



EasyRoll-liukulakana Valkoinen

Taloudellinen vaihtoehto WendyLett-järjestelmällemme. Ero on siinä, että EasyRoll on vuoriton ja siinä on lakanaan laminoitu liukupinta. EasyRoll-järjestelmästä on saatavana useita eri malleja ja kokoja, joissa on erilaisia ominaisuuksia ja jotka auttavat sinua löytämään parhaat ja tarpeitasi vastaavat ratkaisut.

- **Merkkiompeleet helpottavat lakanan asettelua.**



Yleiskatsaus EasyRoll -liukulakanoihin/valkoinen

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta
41801PS	EasyRoll-liukulakana	80	100	180	60	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 41801PS
41802PS	EasyRoll-liukulakana	80	140	180	60	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 41802PS
41803PS	EasyRoll-liukulakana	80	200	180	60	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 41803PS
41901PS	EasyRoll-liukulakana	90	100	200	60	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 41901PS
41902PS	EasyRoll-liukulakana	90	140	200	60	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 41902PS
41903PS	EasyRoll-liukulakana	90	200	200	60	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 41903PS
411051PS	EasyRoll-liukulakana	105	100	215	75	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 411051PS
411052PS	EasyRoll-liukulakana	105	140	215	75	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 411052PS
411053PS	EasyRoll-liukulakana	105	200	215	75	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 411053PS
411201PS	EasyRoll-liukulakana	120	100	230	90	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 411201PS
411202PS	EasyRoll-liukulakana	120	140	230	90	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 411202PS
411203PS	EasyRoll-liukulakana	120	200	220	90	valkoinen	liukulakana	Lakana tuotenumero 411203PS

Materiaali: Sivuosat: puuvilla/polyesteri. Liukupinnat: duchesse (polyesteri)
Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluinetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.





CE Luokan 1 lääkinnällinen laite



EasyRoll-liukulakana Valko-siniraidallinen

Taloudellinen vaihtoehto WendyLett- järjestelmällemme. Ero on siinä, että EasyRoll on vuoriton ja siinä on lakanan laminoitu liukupinta. EasyRoll-järjestelmästä on saatavana useita eri malleja ja kokoja, joissa on erilaisia ominaisuuksia ja jotka auttavat sinua löytämään parhaat ja tarpeitasi vastaavat ratkaisut.

- **Merkkiompeleet helpottavat lakanan asettelua.**

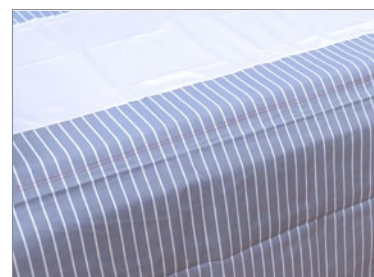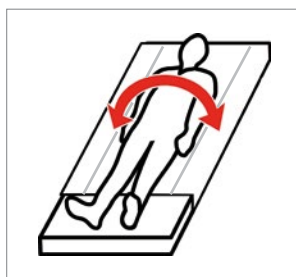

Yleiskatsaus EasyRoll-liukulakanoihin/valko-siniraidallinen

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Lakana	Lakanan pituus	Liukualue
418011	EasyRoll-liukulakana	80	100	180	50	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 418011		
418021	EasyRoll-liukulakana	80	140	180	50	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 418021		
418031R	EasyRoll-liukulakana	80	200	180	60	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 418031R		
419011	EasyRoll-liukulakana	90	100	190	60	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 419011		
419021	EasyRoll-liukulakana	90	140	190	60	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 419021		
419031	EasyRoll-liukulakana	90	200	190	60	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 419031		
419031R	EasyRoll-liukulakana	90	200	90	70	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 419031R		
4110511	EasyRoll-liukulakana	105	100	205	75	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 4110511		
4110521	EasyRoll-liukulakana	105	140	205	75	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 4110521		
4110531	EasyRoll-liukulakana	105	200	205	75	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 4110531		
4110531R	EasyRoll-liukulakana	105	200	105	85	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 4110531R		
4112011	EasyRoll-liukulakana	120	100	220	90	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 4112011		
4112021	EasyRoll-liukulakana	120	140	220	90	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 4112021		
4112031	EasyRoll-liukulakana	120	200	220	90	valko-siniraidallinen	liukulakana		tuotenumro 4112031		

Materiaali: Sivuosat: puuvilla/polyesteri. Liukupinnat: duchesse (polyesteri)

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluinetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.




CE Luokan 1 lääkin-
nällinen laite



EasyRoll-liukulakana AntiSlip-reunalla

EasyRoll-liukulakanassa AntiSlip-reunalla on reunoilla silikonilla vahvistetut luistamattomat pinnat, jotka estävät käyttäjää liukumasta ja putoamasta sängystä.

Liukulakana vedetään patjan reunojen yli ja joustoreuna pitää lakanan paikoillaan. Lakana soveltuu liikuntarajoitteisille ja/tai vaikeista säryistä kärsiville käyttäjille, koska se tarjoaa hyvää tukea käännettäessä, jos käyttäjä makaa suoraan lakanan päällä. Terveystieteiden ammattilaiset voivat myös käyttää EasyRollia yhdessä siirtolakanan tai liukupinnallisen siirtolakanan kanssa teknisenä apuna, kun he kääntävät tai siirtävät sängyssä makaavia käyttäjiä.

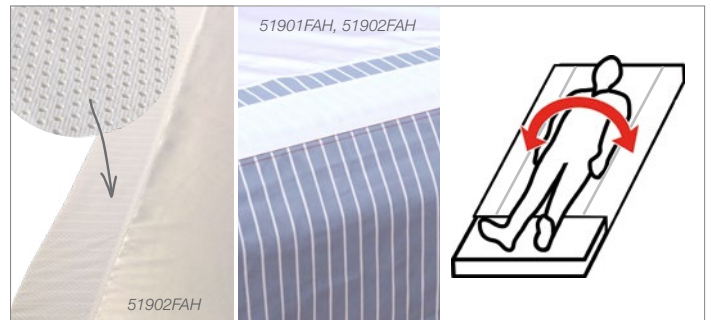

Yleiskatsaus EasyRoll-liukulakanoihin AntiSlip-reunalla

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Lakana	Lakanan pituus	Liukualue
51901FAH	EasyRoll-liukulakana AntiSlip-reunalla	90	100	180	50	valko-siniraidallinen	liukulakana	jarrupinta silikonilla	tuotenumero 51901FAH		
51902FAH	EasyRoll-liukulakana AntiSlip-reunalla	90	140	180	50	valko-siniraidallinen	liukulakana	jarrupinta silikonilla	tuotenumero 51902FAH		
519031RAH	EasyRoll-liukulakana AntiSlip-reunalla	90	200	90	70	sinivalkoinen	liukulakana	jarrupinta silikonilla	tuotenumero 519031RAH		

Materiaali: Sivuosat: puuvilla/polyesteri. Liukupinnat: duchesse (polyesteri)
Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluainetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.




CE Luokan 1 lääkinnällinen laite



EasyRoll-liukulakana, nesteenpitävä

Nesteenpitävä EasyRoll-liukulakana pedataan sänkyyn tavallisen lakanan tavoin ja reunat taitetaan patjan alle pitämään lakanaa paikoillaan. Liukulakanaa nesteenpitävällä kerroksella käytetään, kun halutaan suojata sänkyä vuodoilta. Nesteenpitävä kerros on nestetiivis, ja se estää nesteen tunkeutumisen muihin vuodevaatteisiin tai patjaan. Punaisten merkkiraitojen avulla on helppo tarkistaa, että liukulakana on oikeassa paikassa.

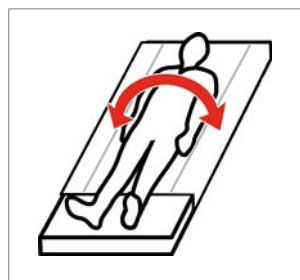

Yleiskatsaus nesteenpitäviin EasyRoll-liukulakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukualue	Lakana	Liukualue
42901PS	EasyRoll-liukulakana, nesteenpitävä	90	100	200	60	valkosisinen	nesteenpitävä liukulakana		tuotenumero 42901PS		
42902PS	EasyRoll-liukulakana, nesteenpitävä	90	140	200	60	valkosisinen	nesteenpitävä liukulakana		tuotenumero 42902PS		

Materiaali: polyesteri. Nesteenpitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri.
Hoito-ohjeet: Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ei kestä kemiallista pesua. Älä käytä valkaisuainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.




CE Luokan 1 lääkinnällinen laite



Easyroll 2Way -siirtolakana

EasyRoll 2Way -siirtolakanaa käytetään yhdessä EasyRoll-liukulakanoiden kanssa. Siirtolakana asetetaan suoraan liukulakanan päälle, ja käyttäjä makaa siirtolakanaalla. Liukulakanan ja siirtolakanan yhdistelmä helpottaa käyttäjän kääntämistä sängyssä. Tarttumalla siirtolakanaan ja vetämällä sitä käyttäjän voi helposti kääntää haluttuun asentoon.

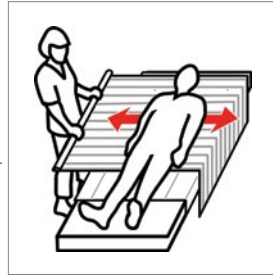

Yleiskatsaus EasyRoll 2Way -siirtolakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukusuunta
2101S	EasyRoll 2Way -siirtolakana -	140	200	-	sini-valkoraidallinen	siirtolakana	raidat osoittavat siirtosuunnan	tuotenumero 2101S	

Materiaali: duchesse, puuvilla/polyesteri.

Hoito-ohjeet: Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kuivataan enintään 70 °C:ssa.





Luokan 1 lääkinnällinen laite



EasyRoll Inco 2Way -liukulakana

EasyRoll Inco 2Way -liukulakana on imukykyinen inkontinenssialusta, jonka nesteestä estävä kerros estää vuodot. Lisäksi tuotteen alapinnassa on vähäkitkainen pinnoite (liukukangas), jonka avulla sängyssä liukuminen on helppoa. Se helpottaa käyttäjän kääntämistä. EasyRoll Inco 2Way -liukulakanoissa on kolme kahvaa kummallakin puolella, joten lakanasta saa erittäin hyvän otteen potilaita sivusuunnassa käännettäessä.

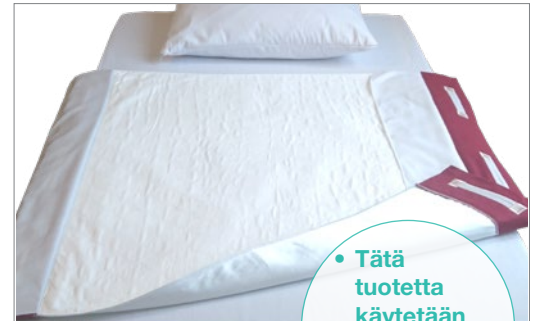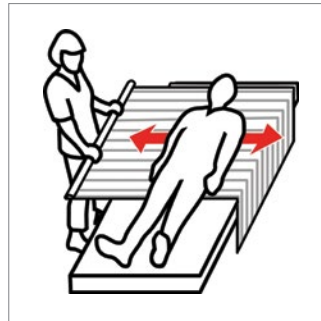

• Tätä tuotetta käytetään ilman alla olevaa liukulakanaa

Yleiskatsaus EasyRoll Inco 2Way -liukulakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukusuunta
10991	EasyRoll Inco 2Way	90	185	-	valkopunainen	liukulakana	2 x 3 kahvaa	tuotenumero 10991	

Materiaali: duchesse. Nesteestä estävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri/raion.

Hoito-ohjeet: Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kuivataan enintään 70 °C:ssa.



Luokan 1 lääkinnällinen laite



Liukupinnallinen EasyRoll 4Way -siirtolakana

Tämä liukupinnallinen siirtolakana asetetaan suoraan liukula-
kanan päälle niin, että liukupinnat ovat vastakkain.
Liukupinnallinen EasyRoll-siirtolakana on terveydenhuollon
henkilökunnan tekninen apuväline, joka helpottaa käyttäjien
kääntämistä ja asennon muuttamista sängyssä. Kun käyttäjää
käännetään, siirtolakanan päädyt irrotetaan patjan alta. Avustaja
tarttuu liukupinnalliseen siirtolakanaan käyttäjän lonkan ja olka-
päähän kohdalta ja ottaa hyvän otteen kankaasta. Sitten avustaja
työskentelee suorin rantein ja nojaa taaksepäin.
Jos avustajia on kaksi, toinen voi auttaa painamalla olkapäätä
ja lonkkaa vastakkaiselta puolelta ja työntämällä käyttäjää.
Näin käyttäjä saadaan käännetyksi.
Kun käyttäjä on käännetty, liukupinnallisen siirtolakanan päädyt
asetetaan patjan alle.



Yleiskatsaus liukupinnallisiin EasyRoll 4Way -siirtolakanoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii potilaalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukusuunta
4011S	Liukupinnallinen EasyRoll 4Way -siirtolakana	-	140	210	-	valkoinen	liukupinnallinen siirtolakana		tuotenumero 4011S
4011L	Liukupinnallinen EasyRoll 4Way -siirtolakana	-	200	200	-	valkoinen	liukupinnallinen siirtolakana		tuotenumero 4011L
4011S1	Liukupinnallinen EasyRoll 4Way -siirtolakana	-	150	200	-	valko-siniraidallinen	liukupinnallinen siirtolakana		tuotenumero 4011S1
4111T	Liukupinnallinen EasyRoll 4Way -siirtolakana	-	140	115	-	valkoinen	liukupinnallinen siirtolakana 2 x 9 kahvaa (patjan alle ulottuvin liepein)		tuotenumero 4111T
4111LT	Liukupinnallinen EasyRoll 4Way -siirtolakana	-	200	115	-	valkoinen	liukupinnallinen siirtolakana 2 x 13 kahvaa (patjan alle ulottuvin liepein)		tuotenumero 4111LT

Materiaali: duchesse, puuvilla/polyesteri.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluainetta. Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kuivataan enintään 70 °C:ssa.



Luokan 1 lääkinnällinen laite



Yleiskatsaus liukupinnallisiin EasyRoll 4Way -siirtolakanoihin, Inco

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii potilaalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukusuunta
10992-5	Liukupinnallinen EasyRoll 4Way -siirtolakana, Inco	-	140	200	-	valkopunainen	liukupinnallinen siirtolakana 2 x 5 kahvaa		tuotenumero 10992-5

Materiaali: duchesse. Nesteepitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri/raion.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluainetta. Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kuivataan enintään 70 °C:ssa.




Luokan 1 lääkinnällinen laite





EasyRoll-tyynyliina

EasyRoll-tyynyliinassa (4303) on liukupinta ja vähäinen sivuttaiskitka, mikä lisää niskan ja olkapään liikkuvuutta. Se vähentää myös pään ja korvien alueen kitkaa. EasyRoll-tyynyliinassa, jossa on nesteenpitävä kerros (4304), on sisäpuolella kerros, joka suojaa liialta ja kosteudelta sekä pölypungeilta. Suojaus vahvistetaan sulkemalla tyynyliina vetoketjulla. Tässä tyynyliinassa ei ole liukutoimintoa.

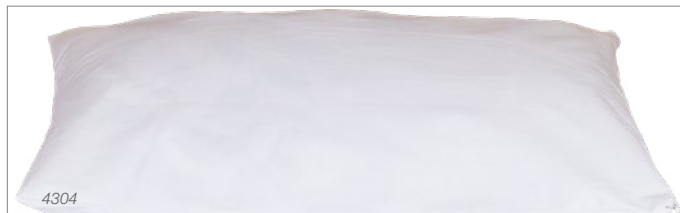

Yleiskatsaus EasyRoll-tyynyliinoihin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	Liukusuunta
4303	EasyRoll-liukutyynyliina	-	50	60	-	valkoinen	tyynyliina	liukupinta ja vähäinen kitka	tuotenumero 4303
4304	EasyRoll-tyynyliina, nesteenpitävä	-	50	60	-	valkoinen	tyynyliina	nesteenpitävä kerros	tuotenumero 4304

Materiaali: 4303: Liukupinta: duchesse (100 % polyesteriä). Sisäpuoli: puuvilla/polyesteri.

4304: Nesteenpitävä kerros: polyuretaani. Pinta: puuvillaneulos.

Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluinetta.

Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kuivataan enintään 70 °C:ssa.




CE Luokan 1 lääkin-
nällinen laite



EasyRoll-suojalakana liepeillä

EasyRoll-suojalakanaa käytetään imukykyisenä suojana sängyssä, kun käyttäjä on pidätyskyvytön. Suojalakana imee itseensä nestettä noin 1–2 litraa/m² ja siinä on laminoitu nesteenpitävä kerros, joka estää nesteen imeytymisen muihin vuodevaatteisiin. Suojalakana on tukeva ja sopii hyvin potilaiden kääntämiseen ja asennon muuttamiseen sängyssä. Kun käyttäjää liikutetaan, avustajan pitää tarttua suoraan lakanan imuosaan, koska sivuosat eivät kestä vetämistä. Suojalakana on yhdessä liukulakanan kanssa erinomainen apuväline inkontinenssiin ja asennon muuttamiseen.

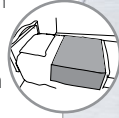

Yleiskatsaus EasyRoll-suojalakanan liepeillä

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii potilalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta	nesteenpitävä kerros
80011B	EasyRoll-suojalakana	80–90	80	180	-	valkoinen/vaaleanvihreä	suojalakana liepeillä		tuotenumero 80011B
80011P	EasyRoll-suojalakana	80–90	80	180	-	valkoinen/vaaleanvihreä	suojalakana liepeillä		tuotenumero 80011P
80011-1	EasyRoll-suojalakana	80–90	85	180	-	valkoinen/vaaleanvihreä	suojalakana liepeillä		tuotenumero 80011-1
80011PL	EasyRoll-suojalakana	80–90	90	210	-	valkoinen/vaaleanvihreä	suojalakana liepeillä		tuotenumero 80011PL
80011PS	EasyRoll-suojalakana	90	70	190	-	valkoinen/vaaleanvihreä	suojalakana liepeillä		tuotenumero 80011PS

Materiaali:

80011B: Päällipuoli: puuvilla/polyesteri. Nesteenpitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri.

80011P: Päällipuoli: polyesteri. Nesteenpitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri.

80011-1: Päällipuoli: puuvilla/polyesteri. Nesteenpitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri.

80011PL: Päällipuoli: polyesteri. Nesteenpitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri.

80011PS: Päällipuoli: duchesse, puuvilla/polyesteri. Nesteenpitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri/raion.

Hoito-ohjeet: Voidaan rumpukuivata 70 °C:ssa. Ei kestä kemiallista pesua. Älä käytä valkaisuainetta. Älä käytä huuhteluainetta.







EasyRoll-suojalakana liepeillä / lisäsuojaa

EasyRoll-suojalakanaa käytetään imukykyisenä suojana sängyssä, kun käyttäjä on pidätyskyvytön. Tässä mallissa on erityisen tehokas imuosa. Suojalakana on tukeva ja sopii hyvin potilaiden kääntämiseen tai asennon muuttamiseen sängyssä. Yhdessä liukulakanan kanssa se on erinomainen apuväline inkontinenssiin ja asennon muuttamiseen.



Yleiskatsaus EasyRoll-suojalakanan liepeillä / lisäsuojaa

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta
80019	EasyRoll-suojalakana	90	120	180	-	valkoinen/vaaleanvihreä	suojalakana liepeillä	 nesteenpitävä kerros tuotenumero 80019 
80018	EasyRoll-suojalakana	90	150	180	-	valkoinen/vaaleanvihreä	suojalakana liepeillä	 tuotenumero 80018 

Materiaali: päällipuoli puuvilla/polyesteri. Imupinta polyesteri/raion. Nesteenpitävä kerros polyuretaani.
Hoito-ohjeet: Voidaan rumpukuivata 70 °C:ssa. Ei kestä kemiallista pesua. Älä käytä valkaisuinetta. Älä käytä huuhteluainetta.

60-90°C
140-194°F



CE Luokan 1 lääkinnällinen laite

EasyRoll-suojalakana ilman liepeitä

Suojalakanaa käytetään imukykyisenä suojana sängyssä, kun käyttäjä on pidätyskyvytön. Suojalakana imee itseensä nestettä noin 1–2 litraa/m² ja siinä on laminoitu nesteenpitävä kerros, joka estää nesteen imeytymisen muihin vuodevaatteisiin. Suojalakana on tukeva ja sopii hyvin potilaiden kääntämiseen ja asennon muuttamiseen sängyssä. Kun käyttäjää liikutetaan, avustajan pitää tarttua suoraan imuosaan, koska sivuosat eivät kestä vetämistä.

Yhdessä liukulakanan kanssa suojalakana on erinomainen apuväline inkontinenssiin ja asennon muuttamiseen. Suojalakanan suuren imukyvyn ansiosta sänky tuntuu käyttäjästä kuivemmalta, koska tuotteen maksimaalista imukykyä ei useinkaan tarvitse hyödyntää.



Yleiskatsaus EasyRoll-suojalakanan ilman liepeitä

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta
80017-1	EasyRoll-suojalakana	80–90	85	90	-	valkoinen/vaaleanvihreä	EasyRoll-suojalakana ilman liepeitä	 nesteenpitävä kerros tuotenumero 80017-1 

Materiaali: polyesteri. Nesteenpitävä kerros: PU. Imuosa: polyesteri.
Hoito-ohjeet: Voidaan rumpukuivata 70 °C:ssa. Ei kestä kemiallista pesua. Älä käytä valkaisuinetta. Älä käytä huuhteluainetta.


60-90°C
140-194°F



CE Luokan 1 lääkinnällinen laite

EasyRoll-suojalakana liukulakanalla

EasyRoll-suojalakanaa liukulakanalla käytetään samalla tavalla kuin EasyRoll-suojalakanaa, mutta siinä on myös ergonomiset sivuosat ja sitä käytetään sängyn suojana pidätyskyvyttömille käyttäjille sekä apuna asennon vaihtamisessa. Suojalakana imee itseensä nestettä noin 1–2 litraa/m² ja siinä on laminoitu nesteenpitävä kerros, joka estää nesteen imeytymisen muihin vuodevaatteisiin. Suojalakana on tukeva ja sopii hyvin potilaiden kääntämiseen tai asennon muuttamiseen sängyssä. Alapuolen liukupinta tekee tästä erinomaisen apuvälineen inkontinenssiin ja asennon vaihtamiseen.

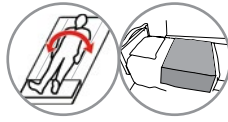

• Tätä tuotetta käytetään ilman alla olevaa liukulakanaa

Yleiskatsaus EasyRoll-suojalakanaan liukulakanalla

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta
80010P	EasyRoll-suojalakana liukulakanalla	80–90	80	180	-	valkoinen	Suojalakana liepeillä ja alapuolen liukupinnalla	nesteenpitävä kerros tuotenumero 80010P

Materiaali: Päällipuoli: polyesteri. Imupinta polyesteri/raion. Nesteenpitävä kerros: polyuretaani. Liukupinta: duchesse.

Hoito-ohjeet: Voidaan rumpukuivata 70 °C:ssa. Ei kestä kemiallista pesua. Älä käytä valkaisuainetta. Älä käytä huuhteluainetta.



EasyRoll-patjansuojus

Patjansuojus suojaa patjaa kosteudelta esimerkiksi inkontinenssin varalta sekä pölypunkeilta, ja se suojaa patjaa tai patjan päälle vedettävää lakanaa muutoinkin.

Patjansuojuksen alapinnalla on nesteenpitävä kerros, joka estää nesteen läpipääsyn ja toimii myös pölypunkkiesteenä.



Yleiskatsaus EasyRoll-patjansuojuksiin

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Sopii patjalle (cm)	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Liukupinta (cm)	Väri	Toiminto	Muuta
90.200J01	EasyRoll-patjansuojus	90	200	90	-	valkoinen	patjan päälle vedettävä	tuotenumero 90.200J01
105.200J01	EasyRoll-patjansuojus	105	200	105	-	valkoinen	patjan päälle vedettävä	tuotenumero 105.200J01
120.200J01	EasyRoll-patjansuojus	120	200	120	-	valkoinen	patjan päälle vedettävä	tuotenumero 120.200J01

Materiaali: Päällipuoli: puuvillaneulos. Nesteenpitävä kerros: polyuretaani.

Hoito-ohjeet: Voidaan rumpukuivata 70 °C:ssa. Ei kestä kemiallista pesua. Älä käytä valkaisuainetta. Älä käytä huuhteluainetta.





SystemRoMedic™

Yli 30 vuotta helpouden palveluksessa

SystemRoMedic on Direct Healthcare Group -konsernin ainutlaatuinen konsepti helppoon liikuttamiseen. Se käsittää markkinoiden laajimman ja kattavimman valikoiman älykkäitä, käyttäjäystävällisiä ja turvallisia apuvälineitä kaikenlaiseen potilaiden liikuttamiseen ja manuaaliseen käsittelyyn. Konseptimme filosofiana on ehkäistä ja vähentää työtapaturmia ja samalla parantaa käyttäjien itsenäisyyttä ja ihmisarvoa. Parannamme ainutlaatuisella koulutuksen ja tehokkaiden liikkuvuusapuvälineiden yhdistelmällämme sekä työympäristöä että hoidon laatua ja luomme samalla mahdollisuuksia merkittäviin kustannussäästöihin. Olemme yli 30 vuoden ajan kehittäneet SystemRoMedicia voidaksemme tarjota yksinkertaisia ratkaisuja loistaviin tuloksiin pääsemiseksi ja helpompaa arkea sekä käyttäjille että terveydenhuollon ammattilaisille.

Direct Healthcare Group -konserni tarjoaa ratkaisuja ja tukea vammaisten ja vanhusten itsenäisyyden lisäämiseksi sekä heidän avustajiensa työn helpottamiseksi.

Direct Healthcare Group -konserni on yksi Euroopan johtavista apuvälineyrityksistä, ja sillä on omia tuotanto- ja myyntiyhtiöitä Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Alankomaisissa, Isoissa-Britanniassa, Ranskassa, Kiinassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Direct Healthcare Group -konsernin tuotteita myyvät myös yhteistyökumppanit ja jälleenmyyjät yli 40 maassa ympäri maailmaa. Laaja valikoimamme laadukkaita tuotteita muodostaa kattavan liikku- mista helpottavien apuvälineiden ja kylpyhuonetuotteiden järjestelmän.



Moving Health Forward

DHG
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, Ruotsi
Puhelin: +46 (0)8 557 62 200 • Faksi: +46 (0)8 557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki
puh. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
www.medimattress.fi