



NYHET

Den innovativa, vadderade sängen för att skydda mot stötskador

Regia gardo

Sängen för optimalt allroundskydd

Sjukdomar som Chorea Huntington, vars symptom inkluderar starka okontrollerade rörelser, gör att patienten riskerar att få stötskador. Sängen är då ofta individuellt vadderad, t.ex. med självskena skumdelar. Regia gardo från Burmeier erbjuder nu en modern lösning som kombinerar säkerhet, komfort och optimal hygien.

Regia gardo kombinerar alla styrkor hos en modern elektriskt justerbar vårdssäng med skräddarsydd invändig vaddering. Gavlar och kontinuerliga sidoskydd är täckta med påsättningsbara kuddar som enkelt kan tas bort för noggrann rengöring. Hela sängen är en haptiskt och visuellt behaglig, värdig plats för vila och avkoppling.

Starka fördelar

- Låg säng för att förhindra fallskador
- Höjjustering på 26–80 cm tillåter ett ryggvänligt arbete vid sängen
- Kontinuerliga sidoskydd som standard för extra skydd och skapande av vadderade sidoytor
- Sittposition och lågt fotläge kan ställas in på liggytan
- Säkert 24-volts-drivningssystem
- Enkel montering av säng och kuddar
- Levereras alltid med passande madrass



Regia gardo kan flyttas genom ett höjjusteringsområde på 26 till 80 cm med hjälp av den intuitiva handkontrollen.



▲ Vaddering runt om ger den boende optimalt skydd för avkopplande vilostunder.



▲ I sittande position kan den boende äta, läsa eller använda en dator i sängen. Det hemtrevliga sidobordet Pleto är den perfekta följeslagaren.



▲ Sidovadderingen rör sig med det kontinuerliga sidoskyddet så att den boende kan lämna sängen på ergonomisk höjd och samtidigt sitta på den mjuka kudden.



▲ Regia gardo levereras som standard med en madrass som anpassar sig flexibelt till liggytans justeringsläge.

Funktioner och detaljer



▲ Kuddarna sitter tätt intill sänggavlarna – så att det inte uppstår några ohygieniska mellanrum.



▲ Segifix-låsen håller sidoskuddarnas ändar mot sängramen utan mellanrum.




▲ Kuddarna kan enkelt tas bort för grundlig rengöring.



▲ Allroundskyddet utan mellanrum skyddar den boende mot stötskador.


Produktegenskaper:

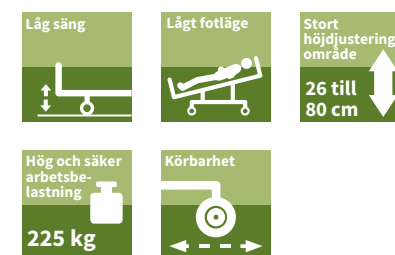

▲ Den valfria stötfångaren förhindrar kollisionsskador vid förflyttning och höjjustering.



▲ Ett praktiskt kardborreband ser till att det inte finns något mellanrum mellan sidoskuddarna och sängramen.

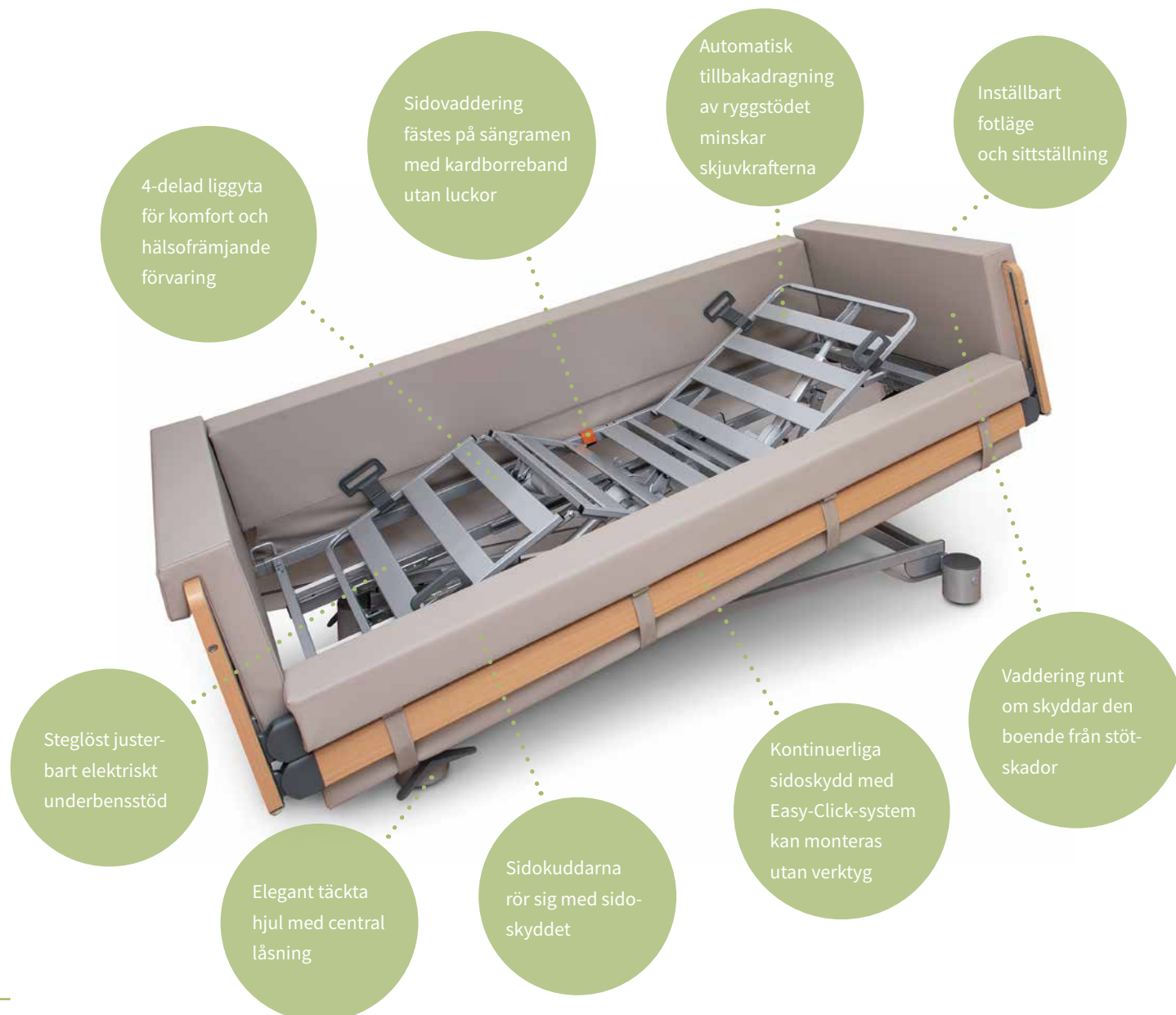


Utrustningar och tillval

Utförande	Regia gardo med standardutrustning: 304400
Liggyta 90 × 200 cm	✓
Madrass 90 x 209 x 14 cm	✓
Höjjustering	26–80 cm
Säker arbetsbelastning	225 kg
4-delad liggyta i metall med tillbakadragning av ryggstödet	✓
Elektrisk höjning av underbensstödet (21 cm)	✓
Lågt fotläge (15°)	✓
Centrallås för fyra hjul	✓
Linak 24-volts-drivningssystem	✓
Huvud- och fotdel Nobla (endast trädekor)	✓
Dekor bok natur	✓
Kontinuerligt sidoskydd (DSG) med Easy Click på båda sidor	✓
Nödsänkning batteri (artikelnummer: 275602)	O
Vaddering	✓
Stötfångare (2 eller 4 styck artikelnummer: 269834)	O
Trendelenburg-handkontroll (endast för vårdinrättningar – artikelnummer: 261651)	O

✓ = standardutrustning O = finns som tillval – = inte möjligt

Yttermått/höjjusteringsområde:

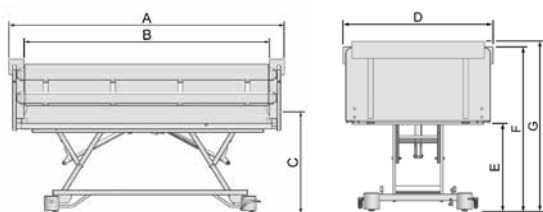

Sänglängd utvändig (med kuddar) A	2350
Sänglängd innermått (med kuddar) B	2080
Liggytans höjd (till liggytan) C	260
Liggytans höjd (till madrassens övre kant) C	400
Sängbredd utvändig (med kuddar) D	1130
Höjd underkant sänghuvud E	130–680
Höjd sidoskydd (med kuddar) F	700–1250
Höjd sänghuvud (med kuddar) G	750–1300
Uppdelning av liggyta ryggstöd–mellanstöd–lårstöd–underbensstöd	720 – 250 – 330 – 540
Längdutjämnning av ryggstöd	110


STIEGELMEYERGROUP
 Solutions for people who care



Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
 Industriestraße 53
 32120 Hiddenhausen
 Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
 Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
 info@burmeier.com
 www.burmeier.com



Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany
Stiegelmeier GmbH & Co. KG
 Ackerstraße 42
 32051 Herford
 Phone +49 (0) 5221 185 - 0
 Fax +49 (0) 5221 185 - 100
 info@stiegelmeier.com
 www.stiegelmeier.com



stiegelmeier-group.com